




Accutron HP-D

ANJİYOĞRAFI
ANGIOGRAPHY

0 40 0 2.0

Accutron HP-D

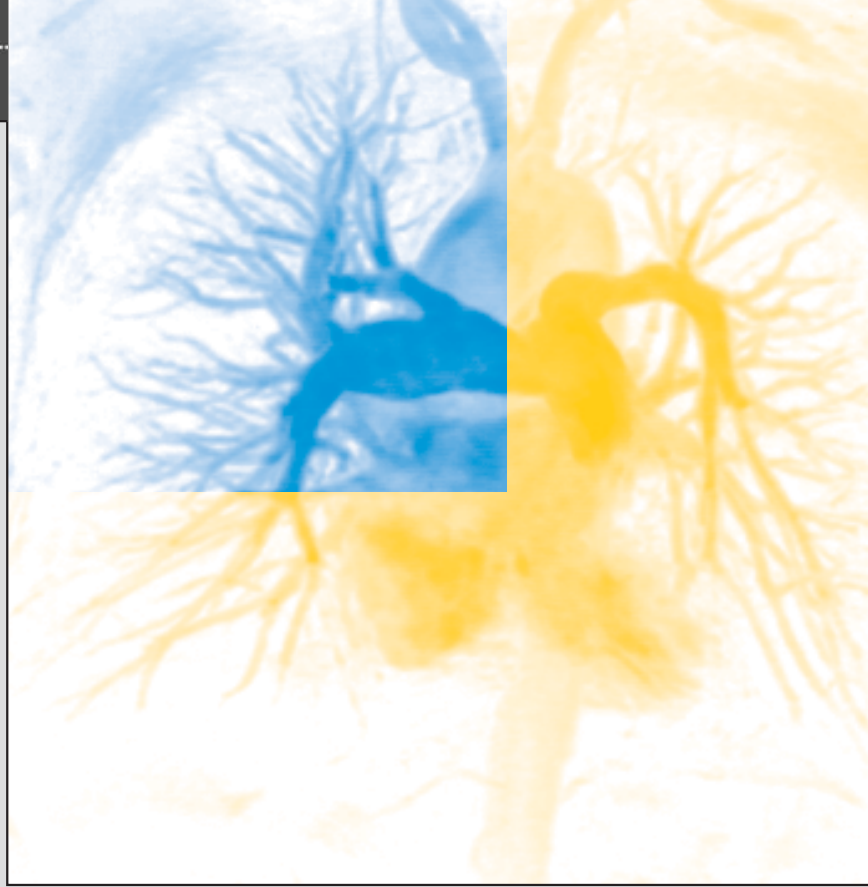

Türkiye Temsilcisi:
Binas Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.
Tel: 0212 2215929, Cep: 0542 543 0224
Faks: 0212 2216776
binas@binasmedikal.com
www.binasmedikal.com

MED(TRON[®] AG

Teknik veriler

Uygulama

- Kablosuz, bataryalı kullanım, tam dijital çift kafalı kullanıcı programlanan anjiografide ve BT de kontrast madde ve tuzlu su enjeksiyonu

Enjektör konsepti

- Mikroişlemci kontrollü çift kafalı enjektör, elektrik kontrollü 2 enjeksiyon ünitesi
- Çok fazlı, kontrast madde ve tuz çözeltisinin enjeksiyonu
- Alternatifli, tek ve çoklu enjeksiyon modu
- Alüminyum kasa
- Entegre ısıtılabilir şırınga tutucular kolay doldurma sistemi 200 ml
- Motor kontrolü ve şarj edilebilen bataryalar tek sistem içinde
- 10.4" dokunmatik ekranlı panel, değişik dillerde
- Manuel doldurma ve hava almak için düğme
- Alternatifli, enjeksiyon parametrelerinin veya basınç grafiklerinin gösterimi

- Otomatik güç koruma modu

Mekanik dizayn

- Mobil kolomda katlanabilen enjektör ünitesi
- 15 derecede emniyetli enjeksiyon pozisyonu Dahili sensör Hava çıkışı için dikey konumlandırma
- Enjeksiyon kontrolü için el düğmesi
- Toplam ağırlık, 48 Kg

Güç

- Kullanım şehir ceryanından bağımsızdır. Enjektör 2 gün bataryası ile kullanılabilir
- Şarj ünitesi voltaj girişleri; 11-240V 50-60 Hz dir
- Güç tüketimi 100 VA dan azdır

Hafıza kapasitesi

- 60 enjeksiyon profili tanımlanabilir ve hafızada saklanabilir.

Enjektör şırıngalarının doldurulması

- Menü den otomatik doldurma veya değişik hızlarda manuel doldurma

- Doldurma hızı 1-8 ml/sn
- Check valfli, yüksek basınçlı hortum sistemi

Enjeksiyon parametreleri Maks.enjeksiyon hacmi

- 2 x 200 ml

Kısmi enjeksiyon hacmi

- 1 - 200 ml, programlanabilir in 1 ml increments

Maks. enjeksiyon basıncı

- 83 bar (1200psi) programlanabilen 5-83 bar, 1 bar basamakla (72.5-1200 psi, 14.5 psi artış ile

İki enjektörün akış hızı

- 0.1-30 ml/sn. programlanabilen ve 0.1 ml/sn basamakla

- Alternatifli olarak, akış hızı veya faz süresi girişi

Yükseliş zamanı

- Programlanabilen 0.1-10sn, 0.1 sn basamakla

Faz sayısı

- 1 - 3

Enjeksiyon gecikmesi

- 0 - 255 s

Faz gecikmesi

- 0 - 255 s

X - ray gecikmesi

- 0 - 255 s

Opsiyonlar

- Kablosuz, dokunmatik ekranlı uzaktan kumanda
- Arabirim



Teknik verileri değiştirme hakkı saklıdır

© 2009 MEDTRON AG

MED TRON

Hauptstraße 255

D-66128 Saarbrücken

Phone: +49 681 97017-0

Fax: +49 681 97017-20

E-Mail: info@medtron.com

Internet: www.medtron.com

DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 13485