

# SIRIO S2/T

AC L  
VE  
TRANSPORT  
VENT LATÖR



# Sirio S2T



## Transport Ventilatör

Portatif acil ventilatörü, ufak boyutlarda ve hafiftir, yeti kinlerin, çocukların ve yenido anların solunum terapisinde, invaziv intubasyon veya maske ile kullanılabilir.

Ventilatör çalı ma prensibi. volumetrik, zaman döngülü, basınç limitlidir. Modlar; AUT+AST-PSV+APNEA BACK Up, CPAP-NIV dir. Dak. Volum: 1-18 lpm , basınç limiti: 0-50 cmH2O, Tidal volum: 15-3000 ml, Solunum Hızı: 5-70 bpm, Basınç: -1 ila -5 cmH2O, PEEP: 0-20 cmH2O arası ayarlanabilir. Dahili karı tırıcı ile O2 de eri %50-100 arasında ayarlanabilir.

Sesli ve görsel alarmları vardır.


Apnea, dü ük batarya düzeyi, yüksek ve dü ük basınç, gaz giri i hataları ve güç hatası.

Bataryası ile 6 saat çalı abilir. Opsiyonel batarya ile de 18 saat çalı abilir. Ambulanslarda kullanıma uygundur ve gerekli ba lantı parçaları vardır.



Ventilatörün opsiyonel taşıma çantası vardır. Sistem içinde 2 lt lik O2 silindiri takma yeri de bulunur. Ambulanslara kolayca monte edilebilir.

Ventilatör de taşıma kolu ve yatak, sedye kenarına ve 30X10 mm boyutundaki duvar barına asmak için askı kolu vardır.

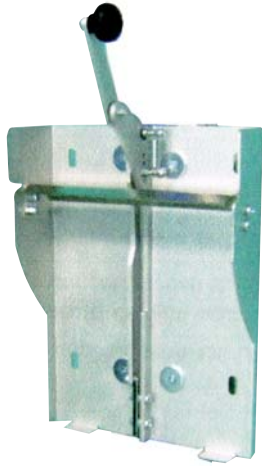

Ambulanslara hızlı bağlantı için dikey bağlantı elemanı vardır.



Opsiyonel, paslanmaz çelik ventilatör ve O2 tüpü taşıma sistemi



**Cod. 09436 - SIRIO S2/T**

**Standard Accessories:**

- n.1 power supply unit 100-240 Vac/12 Vdc (code G30146100)
- n.1 vehicular power supply cable 12V (code G30147100)
- n.1 O<sub>2</sub> supply hose (code G60005100)
- n.1 Silicone patient circuit (code 102641/SLU)
- User's Manual.



**Code A26.049048**  
Trolley for ventilator with 5 wheels and 1 basket for accessories



**Code 03000**  
VAPOUR 2 Electronic humidifier



**Code G00203001**  
Plate for rapid connection of tubular support code G00208000



**Code 05048**  
Castor LT trolley for ventilator



**Code G90003000**  
Transport bag for ventilator



**Code 102641/SLU**  
Silicon patient circuit



**Code 06750/SB**  
Stainless steel patient circuit supporting arm with clamp



**Code G00208000**  
Ventilator support with housing for one lt. O<sub>2</sub> cylinder



**Code G80063001**  
Additional battery pack (12 hours autonomy)

FOR OTHER ACCESSORIES, PLEASE REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE - PER ALTRI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO PREZZI IN VIGORE



REG. N. 327  
UNI EN ISO 9001-2000  
UNI CEI EN ISO 13485-2002

CE 0476



SIARE is not only research, designing and manufacturing but with an efficient and expertise technical service around the world grants the maximum efficiency of its products.

*SIARE non è solo ricerca, progettazione, produzione e vendita ma, con un servizio di assistenza che Vi seguirà passo passo lungo la strada.*



Via G. Pastore, 18  
40056 Crespellano(BOLOGNA) ITALY  
Phone: +39 (051) 96.98.02 (r.a.) - Fax: +39 (051) 96.93.66  
General e-mail: mail@siare.it - Internet: www.siare.it

Distributed by:

**Türkiye Temsilcisi:**  
**Binas Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.**  
**Tel: 0212 2215929, Cep: 0542 543 0224**  
**Faks: 0212 2216776**  
**binas@binasmedikal.com**  
**www.binasmedikal.com**